

**Návod: QRM-400-2EU, QRM-400-2GB**

Čtyřválečkový luxusní masážní přístroj Shiatsu

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO INSTRUKCE. TYTO INSTRUKCE UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.

**DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ**

KDYKOLIV POUŽÍVÁTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ, OBZVLÁŠTĚ V PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ, DODRŽUJTE ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, VČETNĚ NÁSLEDUJÍCÍCH:

- VŽDY odpojte zařízení z elektrické zásuvky ihned poté, co jste skončili s jeho použitím a před jeho čištěním. Správné odpojení provedete tak, že všechna ovládací tlačítka přepnete do pozice 'VYPNUTO' ('OFF'), poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- NIKDY nenechejte zapojený přístroj bez dozoru. Když přístroj nepoužívejte, odpojte ho od přívodu; taktéž tehdy, když na něj umísťujete nebo z něj odebíráte jakékoliv části nebo příslušenství.
- Pokud je tento přístroj používán dětmi, nebo v jejich blízkosti, nebo je používán invalidními nebo postiženými osobami, je nezbytný důsledný dozor.
- Přístroje se NEDOTÝKEJTE, pokud upadl do vody nebo jakékoliv jiné tekutiny. Ihned vypněte přívod energie a ihned ho odpojte ze sítě. Udržujte ho v suchu – NEPOUŽÍVEJTE ho v mokřem nebo vlhkém prostředí.
- Do přístroje NIKDY nevkládejte špendlíky, nebo jakékoliv jiné kovové spony.
- Tento přístroj používejte pouze pro účel, popsáný v této brožuře. NEPOUŽÍVEJTE ho spolu s žádným příslušenstvím, které není doporučeno firmou HoMedics.
- NIKDY přístroj nepoužívejte, pokud má poškozený přívodní kabel nebo zástrčku, pokud nefunguje správně, nebo pokud upadl nebo byl poškozen, nebo byl ponořen do vody. Zašlete ho do Servisního střediska firmy HoMedics (HoMedics Service Centre), kde bude přezkoušen a opraven.
- Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s horkými povrchy.
- Pokud přístroj pracuje příliš dlouho, může dojít k přehřátí výrobku a zkrácení jeho životnosti. Pokud k tomu dojde, přerušete používání přístroje a nechte jednotku před dalším použitím důkladně vychládnout.
- NIKDY do otvoru nevkládejte nebo nespouštějte žádné předměty.
- NEPOUŽÍVEJTE přístroj tam, kde jsou používány aerosolové výrobky (spreje), nebo kde je podáván kyslík.
- NEPOUŽÍVEJTE pod dekou nebo polštářem. Může dojít k přehřátí a způsobit požár, smrt způsobenou elektřinou nebo zranění osob.
- NENOSTE tento přístroj za jeho přívodní šňůru ani jej za ni nedržte.
- NEPOUŽÍVEJTE ve venkovních prostorách.
- Přístroj NEMAČKEJTE. Zabraňte vytvoření ostrých ohybů.
- Tento přístroj vyžaduje zdroj střídavého proudu 230V.
- NEPOKOUŠEJTE se opravit tento přístroj. Neobsahuje žádné části, které by mohly být opraveny uživatelem. Pro jeho opravu ho odešlete do Servisního střediska firmy HoMedics (HoMedics Service Centre). Jakékoliv opravy tohoto přístroje mohou být provedeny pouze servisním pracovníkem autorizovaným firmou HoMedics.


**BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:**

PŘED POUŽITÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PROSÍM PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ ČÁST.

- Pokud máte jakékoliv obavy, týkající se svého zdravotního stavu, konzultujte ho se svým ošetřujícím lékařem dříve, než použijete tento přístroj.

- Osoby s kardiostimulátorem a těhotné ženy by se před použitím tohoto přístroje měly poradit se svým ošetřujícím lékařem.
- NEPOUŽÍVEJTE pro kojence, invalidní nebo spící osoby či osoby v bezvědomí.
- NEPOUŽÍVEJTE v případě necitlivé pokožky nebo pro osoby trpící nedostatečností krevního oběhu.
- Tento přístroj by NIKDY neměl být používán osobami, trpícími jakoukoliv nemocí, která by mohla omezit schopnost uživatele ovládat řídicí prvky přístroje, nebo osobami, které trpí smyslovou nedostatečností dolní části těla.
- NIKDY nepoužívejte přímo na oteklých či zanícených částech těla nebo na oblastech s kožní vyrážkou.
- Pokud při používání tohoto přístroje pocítíte jakékoliv nepříjemné pocity, přestaňte ho používat a konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.
- Toto není přístroj určený pro aplikaci zdravotnickým personálem; je určen pro osobní použití a má poskytnout uvolňující masáž vašim unaveným svalům. NEPOUŽÍVEJTE ho jako náhražku lékařské péče.
- NEPOUŽÍVEJTE ho před tím, než jdete spát. Masáž má povzbuzující účinky a může vám přivodit problémy s usínáním.
- Nepoužívejte přístroj po dobu delší, než je doporučena.

#### VLASTNOSTI VÝROBKU:

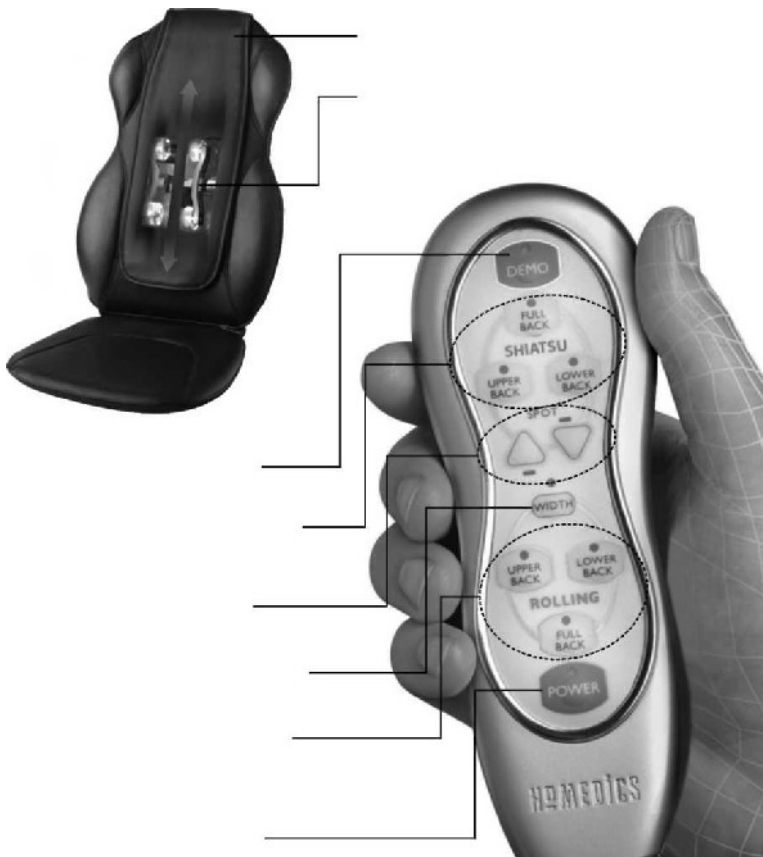

Odstranitelná podložka

Pohyblivý čtyřválečkový masážní mechanismus s LED podsvícením

Tlačítko Demo

Výběr zóny pro masáž Shiatsu

Bod Shiatsu

Nastavení šířky

Výběr zóny pro rotační masáž

Tlačítko Zapnuto/Vypnuto

NÁVOD K POUŽITÍ:

**DŮLEŽITÉ** – Příprava přístroje pro použití

Masážní přístroj Shiatsu je dodáván se šroubem, umístěným v zadní části jednotky, který má

masážní mechanismus ochránit během přepravy. tento šroub musí být odstraněn před prvním použitím, čímž se zpřístupní použití funkce masáže Shiatsu. K odstranění tohoto šroubu použijte přiložený klíč Allen. Tento šroub vyjměte.

**UPOZORNĚNÍ** – Pokud tento šroub nevyjměte, hrozí trvalé poškození přístroje.

**POZNÁMKA:** před tím, než přístroj připojíte k proudu, proveďte kroky 1 až 3.

1. K připevnění masážního sedadla na téměř jakoukoliv židli použijte integrovaný popruh, umístěný v zadní části polštáře. Přesvědčte se, že je sedadlo připevněno pevně, a případně popruh upravte.
2. Propojte přívodní šňůru adaptéru k příslušné šňůře na boku polštáře.
3. Připojte adaptér do zásuvky s 230V.
4. Posadte se, a přístroj ovládejte pomocí dálkového ovládání. Aktivaci ovladače proveďte zmáčknutím tlačítka 'Power' a vyberte jeden z druhů masáže uvedených dole.
5. Pro jemnější masáž si mezi záda a masážní přístroj vložte ručník.
6. Pro zastavení masáže zmáčkněte tlačítka 'Power'. LED kontrolka bude blikat po dobu, než se masážní mechanismus před svým vypnutím vrátí do startovní pozice.

**Masáž Shiatsu:**

1. **KOMPLETNÍ (FULL):** po zmáčknutí tohoto tlačítka obdržíte kompletní Shiatsu masáž horní a dolní části vašich zad.
2. **HORNÍ (UPPER):** po zmáčknutí tohoto tlačítka obdržíte masáž Shiatsu zaměřenou na střední až horní části vašich zad.
3. **DOLNÍ (LOWER):** po zmáčknutí tohoto tlačítka obdržíte masáž Shiatsu zaměřenou na střední až dolní část vašich zad.
4. Tlačítka '▲▼' vám umožní zaměřit masáž na určitou oblast. Jednoduše zmáčkněte jedno z těchto tlačítek a tím zastavíte masážní mechanismus v požadovaném bodě. Tato tlačítka použijte pro pohyb mechanismu nahoru nebo dolů.
5. Pro návrat do standardního masážního režimu znovu potvrďte jedno ze 3 tlačítek masážních zón.

**Rotační masáž:**

1. **KOMPLETNÍ (FULL):** po zmáčknutí tohoto tlačítka obdržíte kompletní rotační masáž horní a dolní části vašich zad.
2. **HORNÍ (UPPER):** po zmáčknutí tohoto tlačítka obdržíte rotační masáž zaměřenou na střední až horní části vašich zad.
3. **DOLNÍ (LOWER):** po zmáčknutí tohoto tlačítka obdržíte rotační masáž zaměřenou na střední až dolní část vašich zad.
4. Tlačítka '◀▶' vám umožní upravit si šířku nastavení masážního mechanismu.

**POZNÁMKA:**

- Abyste zabránili riziku zranění, na sedadlo byste měli vyvinout pouze jemný tlak.
- Pro vaši bezpečnost bylo přístroji nastaveno 15-minutové automatické vypnutí. Tuto funkci byste neměli považovat za náhradu klasického vypnutí přístroje (tlačítka 'OFF'). Pamatujte na vypnutí přístroje vždy, když ho nepoužíváte.
- Výrobek umístěte pouze na takové místo, kde nemůže poškodit buď dřevěnou nebo čalouněnou podlahu.

**ÚDRŽBA:**

**Čištění**

Před čištěním přístroj odpojte a nechte ho důkladně vychladnout. Čistěte ho pouze jemným, mírně vlhkým hadříkem.

- Nikdy nedopustíte, aby přístroj přišel do styku s vodou nebo jinými tekutinami.
- Při čištění přístroj neponořujte do žádné tekutiny.
- Nikdy k čištění nepoužívejte žádná čisticí prostředky, která by mohla přístroj poškrábat, dále kartáče,

leštidla skla / nábytku, ředidla a podobně.

### Skladování

Přístroj umístěte do krabice nebo na bezpečné, suché a chladné místo. Zamezte případnému kontaktu s ostrými hranami či špičatými předměty, jelikož by mohly rozříznout nebo propíchnout textilní povrch. Nikdy **NEOVÍJEJTE** přívodní šňůru kolem přístroje, jelikož by mohlo dojít k jejímu zlomení. Nikdy jednotku **NEVĚŠTE** za přívodní šňůru.

### Zástrčka (POUZE pro MODEL QRM-40002GB)

Pokud je zástrčka tohoto přístroje poškozena, může být nahrazena zástrčkou BS 1363, vybavenou pojistkou 3A BS 1362. S tímto zařízením použijte pouze 3amp pojistku.

Výměnu zástrčky provádějte s velkou opatrností. Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte odborného elektrikáře.

Nákres kabelů v zástrčce:



- Výměnu zástrčky provádějte s velkou opatrností.
- Pokud máte jakékoliv pochybnosti, kontaktujte odborného elektrikáře.
  - Tyto instrukce prosím uchovejte pro budoucí potřebu.