
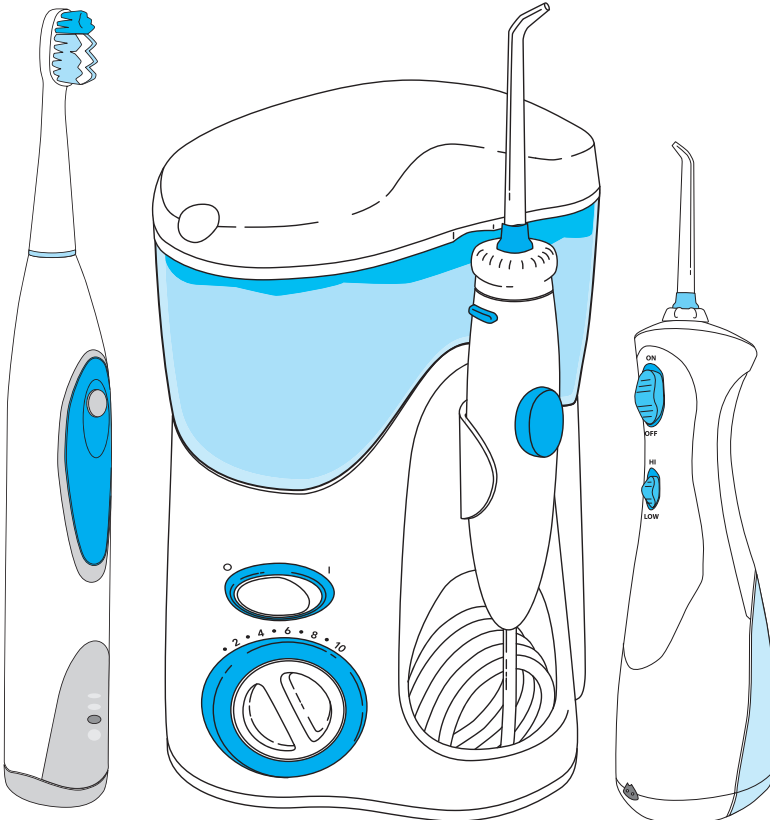


Návod

Profesionální ústní sprcha WaterPik	WP	100
Profesionální cestovní ústní sprcha	WP	450
Profesionální ústní sprcha WaterPik	WP	70
Waterpik Sensonic zubní kartáček	SR	1000
Bateriový mezizubní Flosser WaterPik	FLW	220 UK

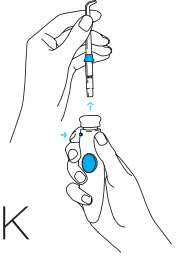

WaterPik Ultra Dental Water Jet WP 100 ...	str. 1	Sensonický zubní kartáček SR 1000 ...	str. 22
Cestovní sprcha WP 450 ...	str. 7	Mezizubní Flosser FLW 220 UK ...	str. 26
Ústní sprcha WP 70 ...	str. 16	Redesept, péče o přístroje ústní hygieny ...	str. 30

Manuál pro profesionální ústní sprchu WaterPik Ultra Dental Water Jet WP 100

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 1
Popis produktu	str. 2
Použití ústní sprchy – začínáme	str. 3
Doporučená technika	str. 4
Údržba a servis přístroje	str. 5
Poruchy a jejich řešení	str. 6
Záruční doba	str. 6

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů tak i u WaterPik Ultra Dental Water Jet WP 100 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí.

Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.

Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumísťujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- PO UKONČENÍ IRIGACE přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
- NESAHEJTE na přístroj pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.


UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:



- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Důkladně proskočte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společností WaterPik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poškození.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučeným stomatology. Poměr ústní vody a vody je 1:1.
- Vyvarujte se používáním tekutin obsahující pevné částice, jinak může dojít k ucpaní trysky nebo irigačního systému.
- Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Popis produktu


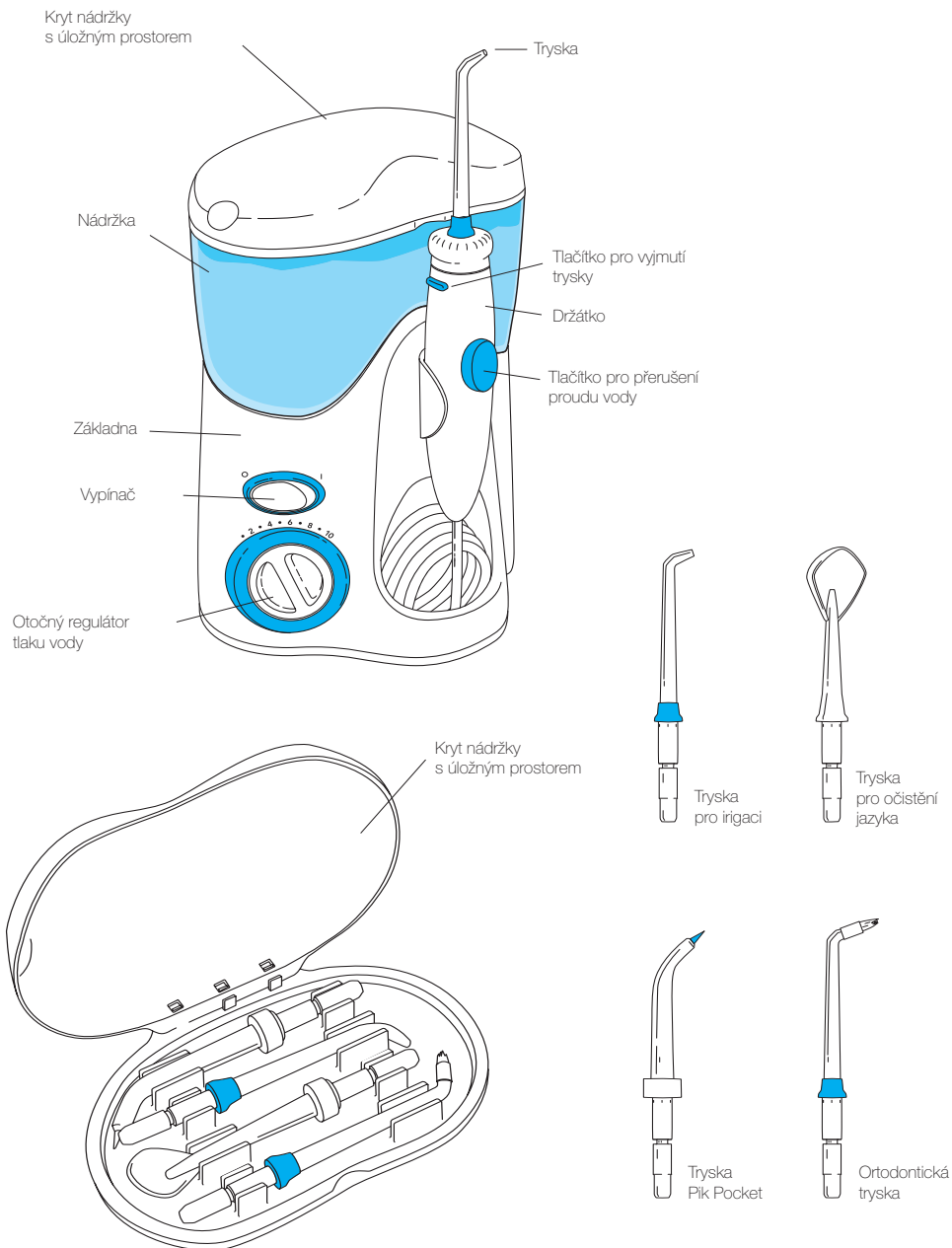


Použití ústní sprchy – začínáme

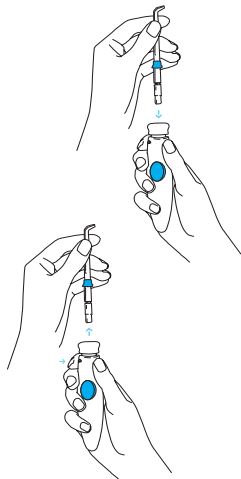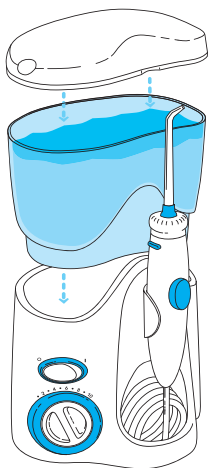

Nastavení tlaku vody:

Při prvním použití přístroje nastavte otočný regulátor tlaku na podstavci na nejnižší hodnotu. Při dalším použití postupně zvyšujte tlak vody na hodnotu, která vám nejlépe vyhovuje nebo dle doporučení zubního lékaře.

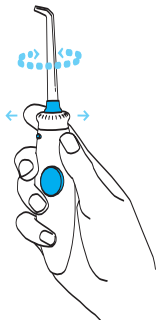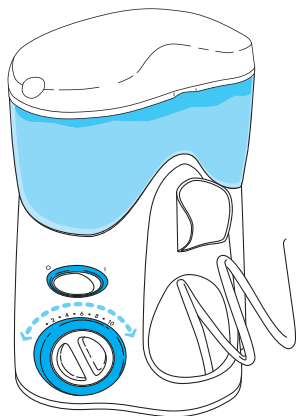

Nádrž:


Vyjměte nádrž ze základny. Naplňte ji vlažnou vodou, do které můžete přidat ústní vodu nebo jiné antibakteriální či hojivé roztoky. Umístěte nádrž na základnu irigátoru a pevně zatlačte směrem dolů.

Trysky:

Vyberte si svoji barevně odlišenou trysku a vložte ji do středu otvoru na konci držátka. Pokud je tryska správně usazena, barevný kroužek trysky je pevně nasazen na konci držátka. Trysku vyjmete z držátka zmáčknutím tlačítka pro vyjmutí trysky.

Vložení trysky do úst:

Vložte trysku do úst tak, aby její ústí směřovalo na zuby. Jemně stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem.

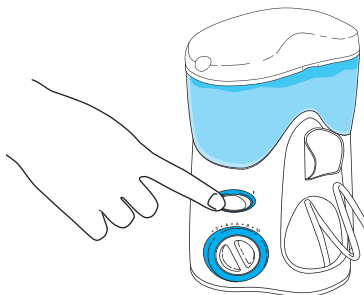

Směr irigační trysky a vodního paprsku lze regulovat otáčením kroužku na konci držátka. Stisknutím tlačítka pro "přerušení proudu vody" můžete krátkodobě přerušit irigaci.

Doporučená technika


Vedte vodní paprsek v pravém úhlu podél dásní. Vodu z úst nechte odtékat volně do umyvadla. Začněte s očistou molárů (zadních stoliček) a systematicky pokračujte směrem k předním zubům. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte u mezizubních prostorů. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory očištěny.

Tlačítko pro přerušení proudu vody:

Stisknutím tlačítka na držátku můžete proud vody kdykoli dočasně přerušit.

Ukončení irigace:


Po ukončení irigace volnou rukou přístroj vypněte. Stiskněte tlačítko pro vyjmutí trysky umístěné pod otočným kroužkem a hlavu trysky vytáhněte z násady irigátoru. Sejměte nádrž a vyprázdněte ji. Odpojte přístroj z el. zásuvky.

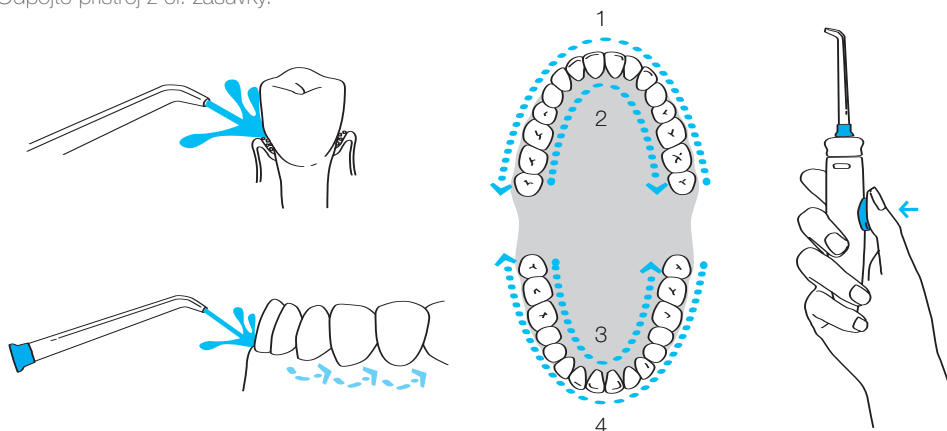

Speciální trysky:


Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach paradontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45 stupňů k zubu). Jemně špičku zavedte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistíte dásňový žlábek okolo všech zubů a případné paradontální choboty.

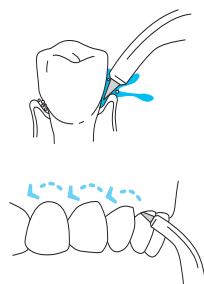


Tryska pro očistu jazyka

Speciální tryska pro očistu jazyka. Vložte trysku na jazyk. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně trysku posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu. Celý postup několikrát opakujte.

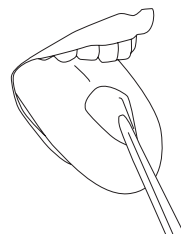

Ortodontická tryska

Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků a těžko dostupných ploch okolo. Pulsující proud vody společně s kartáčkem na konci trysky vyčistí okolí drátků, kroužků, spon apod. Přiložte trysku k zámečku. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapnete tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou očistěte zámeček a jeho okolí. Tryskou proudí voda, která odstraní případné zbytky jídla.

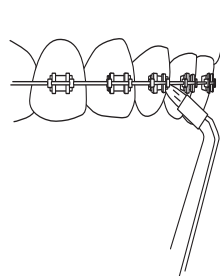

Antibakteriální roztoky

Účinek irigace se zvýší, budete-li používat přístroj WaterPik® spolu s ústní vodou nebo jiným vhodným antibakteriálním roztokem doporučeným zubním lékařem. Některé antibakteriální roztoky mohou zkrátit životnost Vašeho přístroje! Pokud používáte roztoky, vypláchněte nádrž po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a trysku namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje.

Údržba přístroje

- Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.
- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čistícím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- V případě, že by přístroj byl vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdněte obsah nádrže a mějte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.

Pravidelně přístroj odvápnujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje.

Servis

Opravu elektrické části irigátoru WaterPik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek vymění nebo opraví.

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Trysky: Voda vytéká mezi tryskou a kroužkem násady	Tryska není správně nasazena	Sejměte trysku a znovu ji nasadte
Tělo ústní sprchy: Z hadičky vedoucí k násadě teče voda	Poškozená hadička	Musí být vyměněna autorizovaným servisem
Nádrž teče	Chybí zátka nebo je zátka obráceně nasazená	Vyměňte zátku nádoby Obratťte zátku
Nedostatečný tlak	Nádrž není správně usazena	1) Vyměňte a znovu nasadte nádržku 2) Naplňte nádržku tekutinou 3) Naplňte nádržku horkou vodou z vodovodu a přidejte do ní Redesept. Přístroj nechte zapnutý, dokud se nádrž nevyprázdní. Poté vypláchnete nádrž pouze čistou vodou. 4) Nastavte vyšší tlak prostřednictvím otočného regulátoru.
Není slyšet motor	Motor neběží	Ujistěte se, že elektrická zásuvka je funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného přístroje. Přepněte vypínač do polohy ON s větší razancí.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.

Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma WaterPik si vymíňuje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na e-mailovou adresu: info@profimed.cz, www.profimed.cz.

Manuál k přenosnému ústnímu irigátoru Ultra Cordless WP 450

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 7
Popis produktu	str. 8
Použití ústní sprchy – začínáme	str. 9
Doporučená technika	str. 11
Údržba a servis přístroje	str. 14
Záruční doba	str. 14
Poruchy a jejich řešení	str. 15

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako při použití jiných elektrických přístrojů, tak i u WaterPik WP 450 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí.

Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.

Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumístujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY neponořujte baterii do vody nebo do jiných tekutin.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- NIKDY nenabíjejte nabíječkou, která spadla do jakékoliv tekutiny. Okamžitě ji vypojte ze zásuvky.



UPOZORNĚNÍ


Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:

- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Důkladně proskočte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společností WaterPik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poškození.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.
- Udržujte nabíjecí jednotku a elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučeným stomatology. Poměr ústní vody a vody je 1:1.
- Vyvarujte se tekutin obsahující pevné částice, jinak může dojít k ucpaní trysky nebo irigačního systému.
- Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.
- Pouze pro domácí použití.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Popis produktu

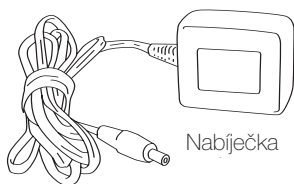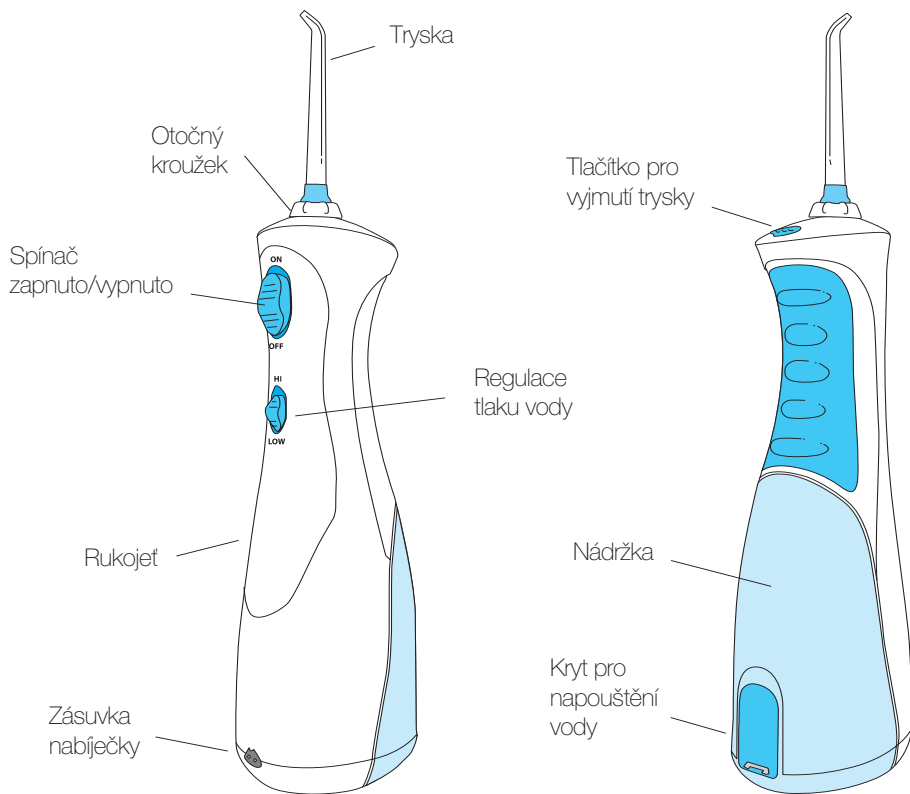


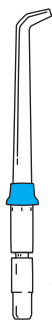


Tryska pro irigaci



Tryska pro očištění jazyka

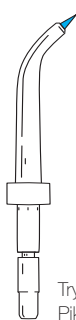

Tryska Pik Pocket

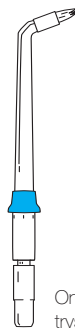


Ortodontická tryska

Použití ústní sprchy – začínáme

DŮLEŽITÉ

Před prvním použitím přístroj nabíjejte minimálně 24 hodin!!!

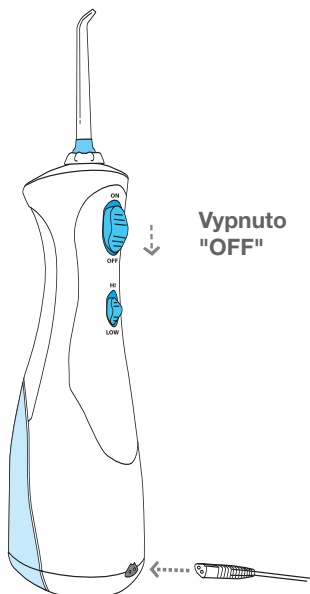

Vypnuto
"OFF"




Důležité!

Po irigaci vždy vypněte přístroj

Elektrickou zástrčku vkládejte jen do standardní zásuvky elektrického napětí. Ústní sprcha Ultra Cordless vydrží nabitá přibližně 1 týden, stav baterie závisí na četnosti používání přístroje.

Naplňte nádržku:

Odklopte krytku na nádržce a naplňte ji vlažnou vodou. Dle potřeby vodu doplňte.

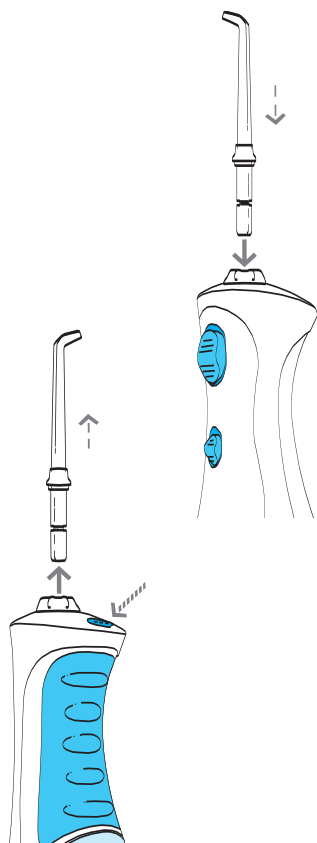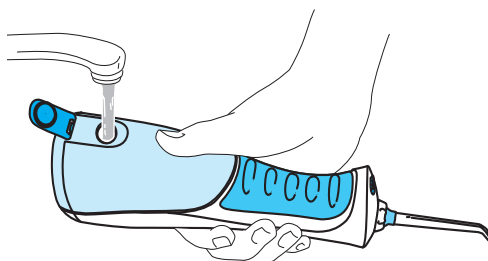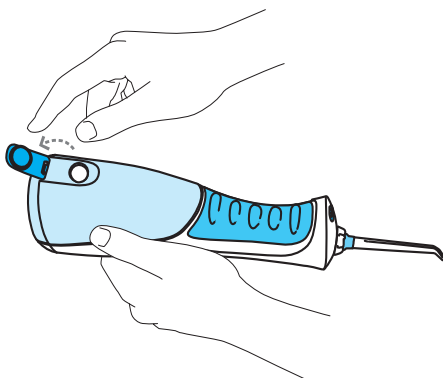


Vložení a vyjmutí trysky:

Vložte trysku do středu horního otvoru na rukojeti. Abyste měli trysku dobře nasazenou, musí být barevný kroužek přesně nasazen na otočném mechanismu.


Abyste vyjmuli trysku z rukojeti, zmáčkněte tlačítko pro vyjmutí trysky (viz obr.) a lehkým tahem trysku vyjměte.

Nastavení tlaku vody:

Tlak vody si můžete jednoduše nastavit posunutím spínače pro regulaci tlaku. Pozice "low" je vhodná pro jemnou irigaci citlivých dásní, pozice "high" je pro vyšší tlak, který je vhodný pro čištění mezi zuby a v linii dásní.

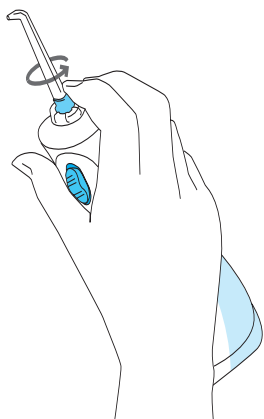

Vodní paprsek lze zamířit otáčením kroužku na konci držátka.

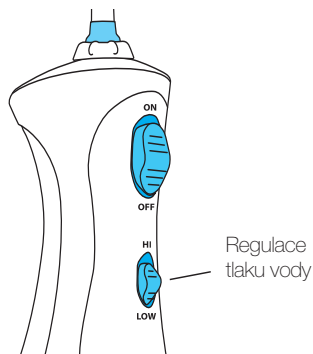


Při používání držte sprchu spíše kolmo, aby byl zajištěn nepřetržitý proud vody.





Doporučená technika



Nakloňte se nad umyvadlo, dejte trysku do úst a nasměrujte ji na zuby. Zapněte přístroj. Vodní paprsek vedte v pravém úhlu podél dásní. Jemně **zavřete ústa, aby voda z úst nestříkala, ale pouze stékala** do umyvadla.

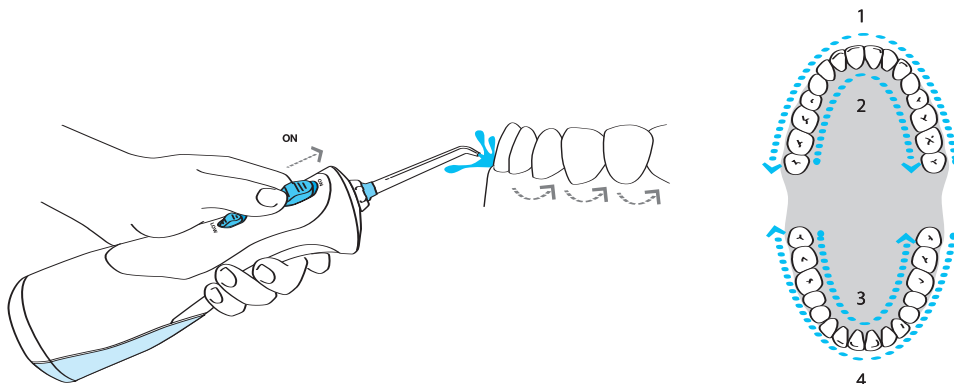


Začněte s očistou stoliček a systematicky posuňte vodní paprsek směrem k předním zubům. Posuňte trysku podél dásní a krátce se zastavte u každého mezizubního prostoru. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory očištěny.

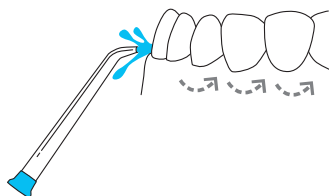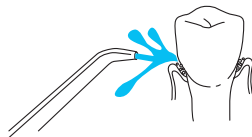

Jakmile skončíte, vypněte přístroj a vyprázdněte nádržku.

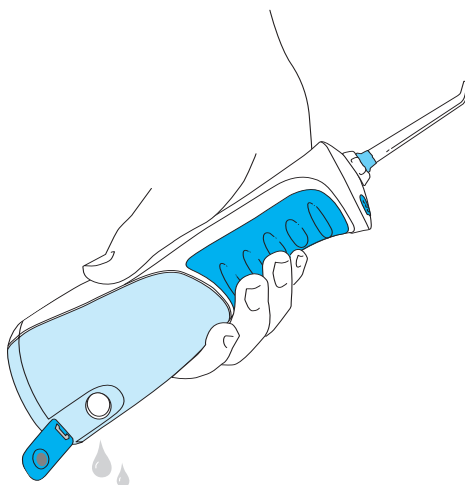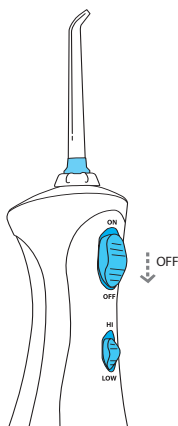


Nádržku můžete sejmout z rukojeti. Uvolněte záklopku na spodní straně nádržky a vysuňte nádržku směrem dolů.




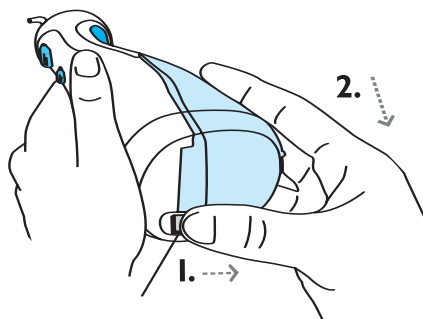


Uvolněte záklopku na nádržce.

Nádržku jemně zasuňte směrem k horní části přístroje tak, aby byla správně usazena.

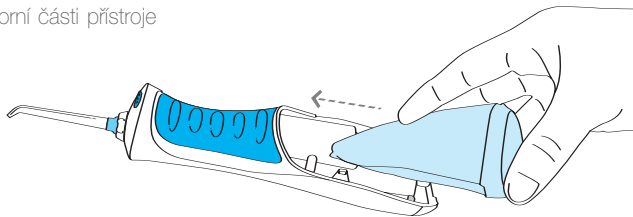

Speciální trysky

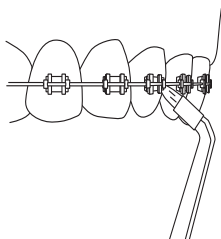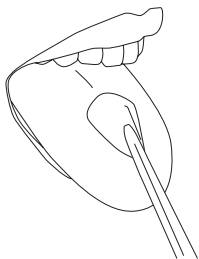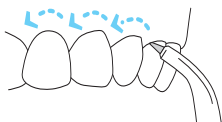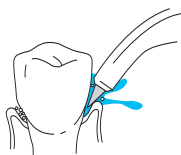

Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach parodontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45 stupňů k zubu). Jemně špičku zaveďte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte nejnižší hodnotu tlaku otočným regulátorem a zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistěte dásňový žlábek a okolí všech zubů. Čistěte dokud není nádržka prázdná.

Tryska pro očistu jazyka

Přiložte trysku na jazyk a nastavte nejnižší hodnotu tlaku, kterou můžete později dle potřeby zvyšovat. Jemně trysku posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu.

Ortodontická tryska

Speciální tryska pro očištění ortodontických zámečků a těžko dostupných míst. Začněte s očištěním stoliček. Vodní paprsek vedte v pravém úhlu podél dásní. Jemně posuňte trysku podél dásní a krátce se zastavte u každého mezi-zubního prostoru a okolí ortodontických zámečků. Pokračujte dokud nejsou zuby ze všech stran očištěny.

Pro optimální výsledek doporučujeme měnit ortodontickou trysku po 6 měsících používání. Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.

Údržba přístroje

Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namiřte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Taktο odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.

- Nikdy neponořujte přístroj do vody.
- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- V případě, že by přístroj mohl být vystaven teplotám pod bodem mrazu, vyprázdněte obsah nádrže a nechejte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se voda nedostane z celého systému.

Pravidelně přístroj odvápnujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje.

Servis

Opravu elektrické části irigátoru WaterPik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek vymění nebo opraví.

Náhradní díly a příslušenství k ústní sprše Ultra Cordless jsou k dostání v autorizovaných servisech. Při reklamaci či jakémkoliv dotazu uveďte sériové číslo, které je umístěno na spodní části výrobku.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.

Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka nebo nabíječky (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma WaterPik si vymíruje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Trysky: Voda vytéká mezi tryskou a kroužkem násady	Tryska není správně nasazena	Sejměte trysku a znovu ji nasadte
Z nádržky teče voda	<ol style="list-style-type: none">1) V nádržce zůstala tekutina2) Nádržka je špatně usazena na rukojeti3) Zátka na nádržce je otevřená	<ol style="list-style-type: none">1) Po použití nádržku vždy vyprázdněte2) Sejměte nádržku a opět ji umístěte zpět dle návodu3) Zavřete zátku na nádržce
Nedostatečný tlak – voda neproudí	<ol style="list-style-type: none">1) Přístroj je používán obráceně – tryskou směrem dolů2) V nádržce je málo tekutiny3) Nádržka je ucpaná4) Tlak je nastaven v poloze "LOW"5) Nádržka není správně umístěna	<ol style="list-style-type: none">1) Pro zajištění správného tlaku musí být tryska ve vyšší poloze než nádržka2) Naplňte nádržku tekutinou3) Naplňte nádržku horkou vodou z vodovodu a přidejte do ní Redesept. Přístroj nechte zapnutý, dokud se nádrž nevyprázdní. Poté vypláchněte nádrž pouze čistou vodou.4) Nastavte vyšší tlak přepnutím spínače pro regulaci tlaku5) Sejměte a znovu nasadte nádržku.
Přístroj nelze zapnout	Baterie není dobítá	<ol style="list-style-type: none">1) Ujistěte se, že el. zásuvka je funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného přístroje. Vypněte přístroj a nabíjejte jej 16 hodin.2) Ujistěte se, že jsou kontakty nabíječky čisté a volné

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@profimed.cz.
www.profimed.cz

Manuál pro profesionální ústní sprchu WaterPik WP 70

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 16
Popis produktu	str. 17
Použití ústní sprchy – začínáme	str. 18
Doporučená technika	str. 19
Údržba a servis přístroje	str. 20
Poruchy a jejich řešení	str. 21
Záruční doba	str. 21

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů, tak i u WaterPik WP 70 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí.

Vždy uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.

Pečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumistujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- PO UKONČENÍ IRIGACE přívodní kabel vytáhněte ze zásuvky.
- NESÁHEJTE na přístroj pokud spadne do vody. Okamžitě vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.




UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zásahu elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:


- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Kvalitně, důkladně proškolete a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Nestříkejte vodu přímo pod jazyk, do oblasti uší, nosu a dalších citlivých oblastí. Bez přiloženého příslušenství doporučeného společností WaterPik Technologies může tento přístroj způsobit vážná poškození.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze trysky, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.
- Udržujte elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Plňte nádržku pouze vodou nebo jiným roztokem (ústní vodou apod.) doporučeným stomatology. Poměr ústní vody a vody je 1:1.
- Vyvarujte se tekutin obsahující pevné částice, jinak může dojít k ucpaní trysky nebo irigačního systému.
- Nepoužívejte ústní vodu, která obsahuje alkohol.
- Pro minimalizaci rizika spadnutí základny do vany nebo jiné tekutiny, připevněte přístroj pomocí držáku na zeď.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Popis produktu

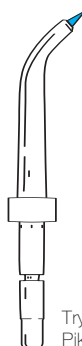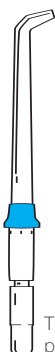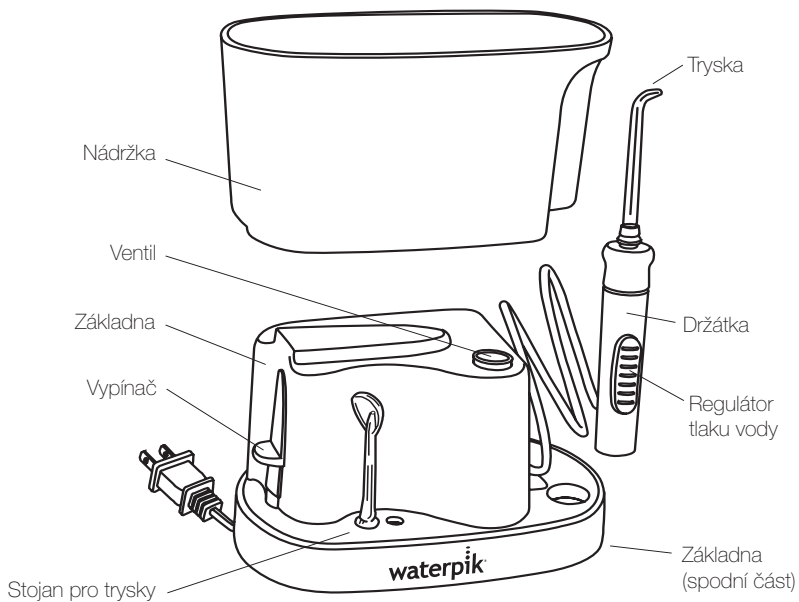

Použití ústní sprchy – začínáme

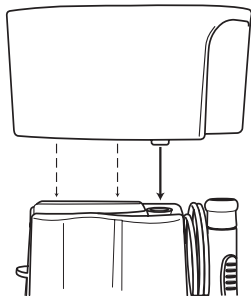


Nádrž:

Vyjměte nádrž z podstavce. Naplňte ji vlažnou vodou, do které můžete přidat ústní vodu nebo jiné antibakteriální či hojivé výplachy. Umístěte nádrž na podstavec irigátoru a pevně zatlačte směrem dolů.




Trysky:

Vyberte si vaši barevně odlišenou trysku a vložte ji do středu otvoru na konci držátka. Pokud je tryska správně usazena, barevný kroužek trysky je pevně nasazen na konci držátka.

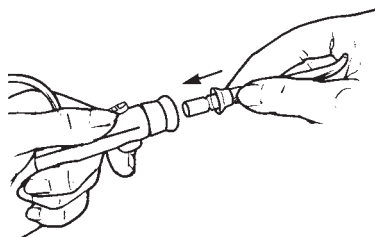

Nastavení tlaku vody:

Při prvním použití nastavte regulátor tlaku vody na nejnižší hodnotu. Postupně zvyšujte intenzitu tlaku na vámi požadovanou úroveň nebo na stupeň tlaku doporučený zubním specialistou.

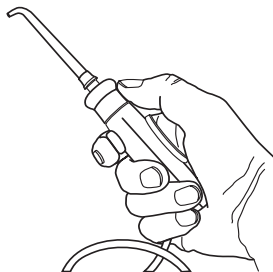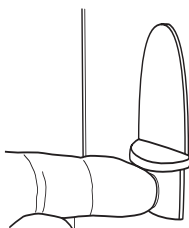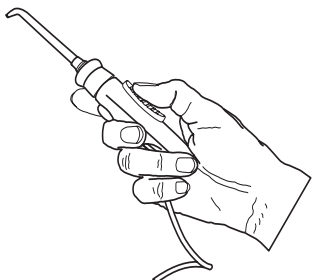


Vložení trysky do úst:

Vložte trysku do úst tak, aby její ústí směřovalo na zuby. Jemně stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Nastavte požadovanou hodnotu tlaku otočným regulátorem. Ovládejte vodní paprsek otáčením kroužku na konci držátka. Stisknutím tlačítka na držátku můžete proud vody přerušit.

Doporučená technika

Veďte vodní paprsek v pravém úhlu podél dásní. Vodu z úst nechte odtékat volně do umyvadla. Začněte s očistou molárů (zadních stoliček) a systematicky pokračujte směrem k předním zubům. Posunujte trysku okolo linie dásní a krátce se zastavte mezi jednotlivými zuby – mezizubní prostory. Pokračujte dokud nejsou všechny zuby a mezizubní prostory očištěny.

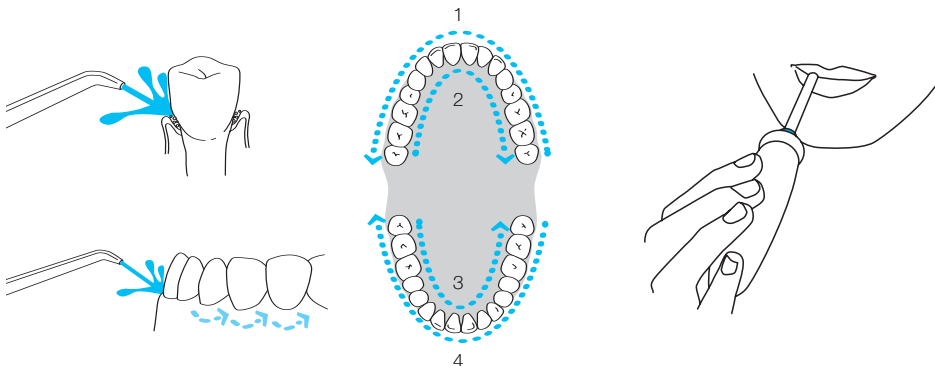


Tlačítko pro přerušení proudu vody:


Stisknutím tlačítka na držátku můžete proud vody kdykoli dočasně přerušit.

Ukončení irigace:

Po ukončení irigace volnou rukou přístroj vypněte. Stlačením otáčecího kroužku, trysku vytáhněte z násady irigátoru. Sejměte nádrž a vyprázdněte ji. Odpojte přístroj z elektrické zásuvky.

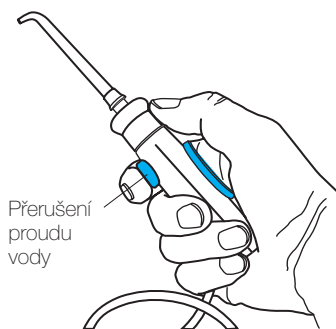


Přerušování proudu vody

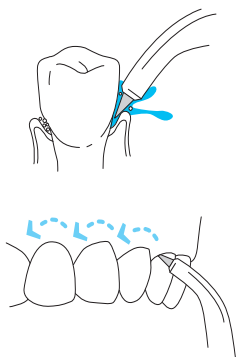

Speciální trysky:

Tryska Pik Pocket

Speciální tryska pro výplach parodontálních chobotů vodou nebo antibakteriálními roztoky. Vložte trysku do úst tak, aby gumová špička směřovala k linii dásní (45 stupňů k zubu). Jemně špičku zaveďte pod úroveň dásně do chobotu. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku otočným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně tryskou vyčistíte dásňový žlábek okolo všech zubů a případné parodontální choboty. Tryska není součástí výbavy.

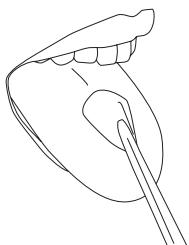

Speciální trysky:

Tryska pro očistu jazyka

Vložte trysku na jazyk. Stiskněte rty a nakloňte se nad umyvadlo. Nastavte **nejnižší** hodnotu tlaku posuvným regulátorem. Volnou rukou zapněte tlačítko pro spuštění přístroje. Jemně trysku posuňte do středu jazyka přibližně v polovině délky a jemným tlakem táhněte dopředu. Celý postup několikrát opakujte.

Antibakteriální roztoky

Účinek irigace se zvýší, budete-li používat přístroj WaterPik® spolu s ústní vodou nebo jiným vhodným antibakteriálním roztokem doporučeným zubním lékařem. Některé antibakteriální roztoky mohou zkrátit životnost vašeho přístroje! Pokud používáte roztoky, vypláchněte nádrž po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a trysku namířte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodloužíte životnost přístroje.

Údržba přístroje

Pokud používáte roztoky, nádrž vypláchněte po každém použití. Naplňte ji zčásti teplou vodou z vodovodu a násadu s tryskou namířte do umyvadla. Zapněte přístroj a nechte protékat vodu tryskou tak dlouho, až se nádrž zcela vyprázdní. Takto odstraníte všechny zbytky roztoku a prodlouží se životnost přístroje. Sundejte trysku z násady a uložte ji do úložného prostoru.

- V případě potřeby očistěte přístroj měkkým hadříkem a jemným neabrazivním čisticím prostředkem. Přístroj nenamáčejte.
- Před čištěním odpojte přístroj ze sítě.
- V případě, že by přístroj byl vystaven teplotám pod bod mrazu, vyprázdňete obsah nádrže a mějte přístroj zapnutý tak dlouho, dokud se nádrž zcela nevyprázdní.

Pravidelně přístroj odvápnujte pomocí přípravku Redesept. Tento přípravek zbaví přístroj vodního kamene a zároveň jej dezinfikuje.

Servis

Opravu elektrické části irigátoru WaterPik® včetně napájecího kabelu je oprávněn provádět pouze autorizovaný servis.

Nepokoušejte se sami o opravu. V případě poruchy přístroje se obraťte na autorizovaný servis, kde vám výrobek vymění nebo opraví.

Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Trysky: Voda vytéká mezi tryskou a kroužkem násady	Tryska není správně nasazena	Sejměte trysku a znovu ji nasadte
Tělo ústní sprchy: Z hadičky vedoucí k násadě teče voda	Poškozená hadička	Musí být vyměněna autorizovaným servisem
Nádrž teče	Chybí zátka nebo je zátka obráceně nasazená	Vyměňte zátku nádoby Obratě zátku
Nedostatečný tlak	Nádrž není správně umístěna	1) Vyměňte a znovu nasadte nádržku 2) Naplňte nádržku tekutinou 3) Naplňte nádržku horkou vodou z vodovodu a přidejte do ní Redesept. Přístroj nechte zapnutý, dokud se nádrž nevyprázdní. Poté vypláchnete nádrž pouze čistou vodou. 4) Nastavte vyšší tlak
Není slyšet motor	Motor neběží	Ujistěte se, že elektrická zásuvka je funkční, zkontrolujte ji pomocí jiného přístroje. Přepněte vypínač do polohy ON.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.

Záruka se nevztahuje na trysky ústní sprchy atd.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma WaterPik si vyměňuje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na e-mailovou adresu: info@profimed.cz, www.profimed.cz.

Manuál pro WaterPik Sensonic sonický zubní kartáček SR1000

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 22
Popis produktu	str. 23
Použití Kartáčku Sensonic – začínáme	str. 23
Údržba přístroje	str. 25
Poruchy a jejich řešení	str. 25
Záruční doba	str. 25

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Stejně jako u použití jiných elektrických přístrojů, tak i u WaterPik Sensonic SR1000 je třeba dbát na vyšší bezpečnost při manipulaci, obzvláště jsou – li v blízkosti dětí.

Níže uvedená bezpečnostní doporučení by měla být vždy dodržována.

Přečtěte si prosím celý návod před použitím přístroje.

NEBEZPEČÍ

- NIKDY nepoužívejte přístroj, jestliže máte mokré nebo vlhké ruce.
- NIKDY neumistujte a neskladujte přístroj na místě, odkud by mohl spadnout do vany nebo umyvadla s vodou.
- NIKDY neponořujte baterii do vody nebo do jiných tekutin.
- NIKDY nepoužívejte přístroj při koupání či sprchování.
- NIKDY nenabíjete nabíjecí základnou, která spadla do jakékoliv tekutiny. Okamžitě ji vypojte ze zásuvky.


UPOZORNĚNÍ

Pro snížení rizika zasažení elektrickým proudem, požáru, vážnějších zranění a škod dodržujte následující:

- Nepoužívejte přístroj, jestliže má poškozený elektrický kabel, přípojku nebo v případě pádu přístroje do jakékoliv tekutiny.
- Důkladně proskočte a dohlédněte na děti při užívání přístroje.
- Používejte tento přístroj pouze tak, jak je uvedeno v manuálu nebo dle doporučení lékaře.
- Používejte pouze hlavice, které jsou doporučovány společností WaterPik Technologies.
- Udržujte nabíjecí jednotku a elektrický kabel v dostatečné vzdálenosti od horkých povrchů.
- Pro minimalizaci rizika spadnutí nabíjecí základny do vany nebo jiné tekutiny.
- Jestliže Vám Váš lékař doporučí užívání antibiotik před plánovaným dentálním zákrokem, měli byste s ním konzultovat použití přístroje i ostatních dentálních pomůcek.
- Osoby s kardiostimulátory by měly užívání přístroje konzultovat s lékařem.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!

Popis produktu

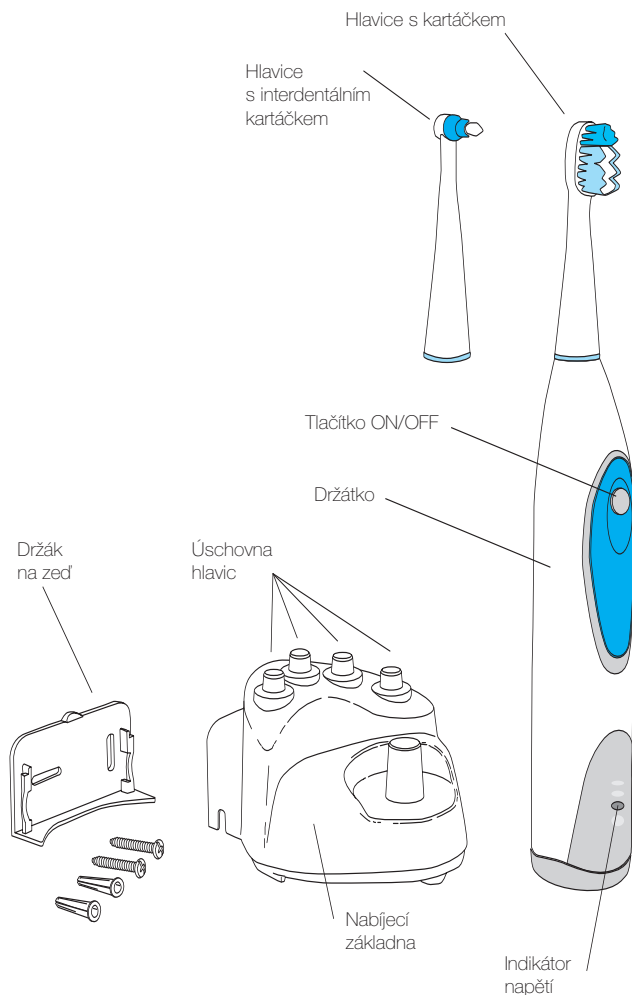

Použití Kartáčku Sensonic – začínáme

Před prvním použitím:

Vložte tělo (rukojeť) kartáčku Sensonic do nabíjecí základny. Přestože je rukojeť kartáčku při výrobě nabita, je možné, že akumulátor část své energie během transportu pozbyl.

Před prvním použitím přístroje je potřeba rukojeť nabít po dobu alespoň 24 hodin.

Lehké zahřátí nabíjecí základny a rukojeti doprovází proces nabíjení.

Kartáček lze po jednorázovém nabití použít 12 x po dobu 2 minut (celkem 24 minut) a není třeba jeho držátko vždy po použití ukládat do nabíjecí základny. Pokud i přesto necháte kartáček znovu nabíjet, máte k dispozici maximální množství energie pro další čištění.



Čištění zubů kartáčkem Soniconic

Výměnné hlavy pouze jemně nasuňte, neotáčejte. Vsuňte pracovní hlavici do úst předtím než kartáček zapnete.

Zvolte si rychlost čištění:



Pomalá rychlost – jemně čistí zuby a masíruje dásně

Vysoká rychlost – skvěle odstraňuje zubní plak.

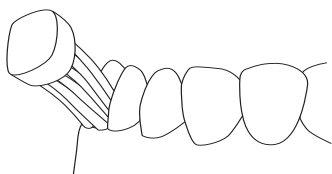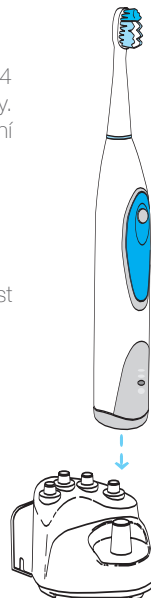

Přiložte kartáček přímo k okraji dásní v úhlu 45 stupňů k ose zubů a dásní.

Netlačte na kartáček, nechte štětiny opatrně klouzat po zubech a dásních.

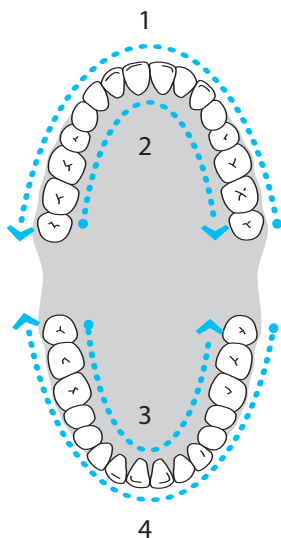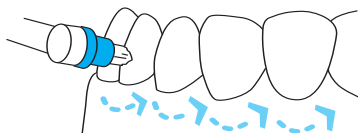

Pohybujte kartáčkem pomalu v ústech. Je doporučováno strávit 30 vteřin čištěním jedné poloviny zubního kvadrantu. Quadrant timer: Váš Sonicnický zubní kartáček po uplynutí 30 vteřin krátce přeruší činnost, po kterých je doporučeno přejít na čištění jiného kvadrantu.

Použití interdentálního kartáčku

Zasuňte hlavici s interdentálním kartáčkem do držátka. Kartáček může být použit s nebo bez zubní pasty. Zasuňte kartáček krouživým pohybem do mezizubního prostoru. Zapněte kartáček a zlehka kopírujte zubní krčky.

Údržba přístroje

Čistíte hlavu kartáčku po každém použití: Zapněte opět kartáček Sensonic a ponechte vibrovat štětiny po dobu 5 až 10 sekund pod proudem tekoucí vody tak, aby se veškeré zbytky zubní pasty vyplavily. Protřepejte kartáček a držátko pečlivě osušte ručníkem, potom můžete vsunout kartáček do nabíjecí základny.

Držátko

Držátko otřete navlhčeným vatovým tampónem a poté osušte jemným hadříkem.

Nikdy neponořujte rukojeť do vody.

Nabíjecí základna

VYTÁHNĚTE KABEL ZE ZÁSUVKY. Očistěte nabíjecí základnu jemným hadříkem nebo papírovým ubrouskem. NABÍJECÍ ZÁKLADNA MUSÍ BÝT BEZPODMÍNEČNĚ SUCHÁ DŘÍVE, NEŽ JI OPĚT ZAPOJÍTE DO ZÁSUVKY. NIKDY JI NEPONOŘUJTE DO VODY.

Obměňujte hlavu kartáčku vždy nejpozději jednou za 3 měsíce. Dbejte, prosím, na to, aby štětiny nebyly opotřebené, zkroucené nebo zlomené. Novou náhradní hlavici obdržíte v místě zakoupení kartáčku Sensonic.

Alespoň jednou v roce je potřeba kartáček zcela vybit. Jednou nebo dvakrát v roce vybijte zcela kartáček pravidelným používáním bez opětovného dobíjení v nabíjecí základně. Asi po dvou týdnech používání kartáček přestane zcela pracovat, nechte ho přes noc nabít.

Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nelze spustit	Napájecí baterie je vybitá	Vložte přístroj do nabíječky a nabíjejte minimálně 24 hodin.

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce držátka nebo nabíjecí základny (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma WaterPik si vymíňuje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na e-mailové adrese: info@profimed.cz, www.profimed.cz.

Manuál pro bateriový mezizubní Flosser FLW 220 UK

Obsah:

Bezpečnostní upozornění	str. 26
Popis produktu	str. 27
Použití WaterPik Flosseru – začínáme	str. 27
Doporučená technika	str. 28
Údržba přístroje	str. 28
Výměna baterie	str. 29
Výbava a náhradní díly	str. 29
Poruchy a jejich řešení	str. 29
Záruční doba	str. 29

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ
PROČTĚTE CELÝ MANUÁL.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Vyvarujte se polknutí nebo inhalaci flosovací špičky. Pokud k této situaci dojde, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
- Tento přístroj není vhodný pro handicapované občany a děti do 12 let i pod dohledem dospělé osoby.
- Přístroj používejte v souladu s návodem.
- Při používání WaterPik Flosseru se plně věnujte této činnosti.
- Přístroj používejte v souladu s návodem nebo dle doporučení Vašeho zubního lékaře.
- Pokud přístroj jeví známky poškození, nepoužívejte jej.

TENTO NÁVOD SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE!


Popis produktu



Použití Waterpik Flosseru – začínáme

Uchopte přístroj pohodlně do ruky.

- Nasadte flosovací špičku přímo ze zásobníku a zatlačte dokud není špička pevně uchycena. Zásobník uchovávejte na suchém a čistém místě.
- Přesvědčte se, že je špička pevně uchycena.
- Zmačknutím a podržením tlačítka „Start“ probíhá flosování.


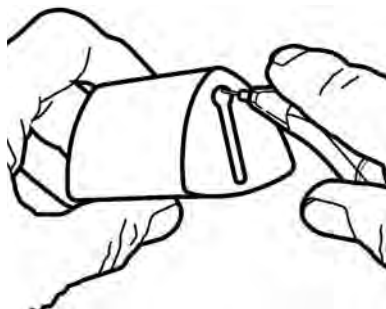


Doporučená technika

Doporučujeme, aby flosování probíhalo před zrcadlem, kde můžete lépe kontrolovat zavádění flosovací špičky mezi zuby. WaterPik Flosser je vybaven tlačítkem „Start“. Pokud je tlačítko stisknuté, přístroj pracuje a špička kmitá rychlostí 10.000 kmitů za minutu.

Nastavte WaterPik Flosser do vertikální polohy. Protože špička dosáhne do všech mezizubních prostor, vždy flosujte směrem z vnější strany (od tváře). Jemně zavedte flosovací špičku mezi zuby přímo k dásni co nejdále. Pokud pocítíte odpor, změňte jemně úhel a zapněte přístroj. Vibrující špička se zavádí snadněji i do špatně dostupných prostor.


- Jakmile je špička zavedena do mezizubního prostoru, zmačkněte tlačítko „Start“ a po celou dobu flosování jej držte. Pohybujte špičkou jemným pohybem vpřed a vzad. Pokud nelze snadno zavést špičku mezi stoličky, špičku jemně ohněte do pravého úhlu a vsuňte.
- S flosováním začínejte u předních zubů a pokračujte směrem dozadu ke stoličkám.
- Při každé změně mezizubní prostory přístroj vypněte.
- Nezapomeňte čistit každou stranu chrupu a veškeré mezizubní prostory.

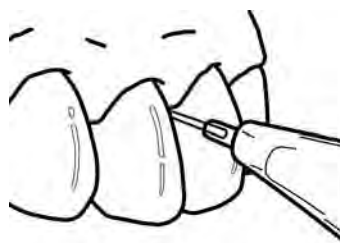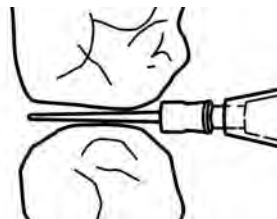

Údržba přístroje

Doporučujeme, aby po každém flosování byla špička nahrazena novou.


- Špičku vyjmete tak, že ji vložíte do otvoru ve tvaru klíčové dírky, který se nachází na zásobníku a jemně zatáhněte přístrojem směrem k sobě.
- Špičku lze vyjmout i pouhou rukou.
- Přístroj otřete navlhčeným měkkým hadříkem. Nikdy jej nevkládejte do žádné tekutiny a nečistěte jej pod tekoucí vodou.

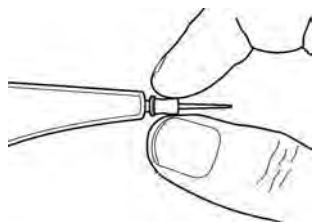

Výměna baterie

WaterPik Flosser je dodáván s tužkovou baterií AA 1,5V.

- Uchopte jednou rukou hlavici a druhou rukou zatáhněte směrem dolů „Držadlo a ochrannou krytku“.
- Vyměňte starou baterii a vložte novou, tak aby byly správně nastaveny póly +/- dle piktogramů uvnitř.
- Zatlačte „Držadlo a ochrannou krytku“ zpět na přístroj.

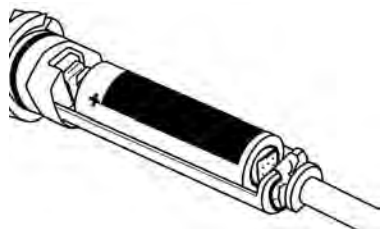

Výbava a náhradní díly

WaterPik Flosser je standardně dodáván s výbavou AA 1,5 V baterií a 15 náhradními flosovacími špičkami. Zásobník s 15 flosovacími špičkami zakoupíte ve dvou provedeních - whitening mint – bělicí a regular - nebělicí.

Poruchy a jejich řešení

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Přístroj nelze spustit	Napájecí baterie je vybitá Nedržíte tlačítko „Start“	Vyměňte stávající za novou baterii Stiskněte a po celou dobu flosování držte tlačítko „Start“
Špička nedrží	Špička je špatně uchycena	Přesvědčte se, že je špička nasazena na celé ploše násadky

Záruční doba

Záruční list platí pouze pro přímého kupujícího tohoto výrobku.

Záruka platí dva roky od data prodeje. Jestliže se během doby platnosti záruční lhůty poškodí funkce tlačítka „Start“ nebo motorku (vyjma zjevného poškození špatným zacházením nebo použitím nepředepsaného zdroje napětí či transformátoru), firma WaterPik si vymíruje právo výrobek posoudit a dle svého uvážení opravit nebo vyměnit vadné části výrobku. Zkontrolujte si proto, zda Vám prodejce doplnil razítko a datum prodeje na zadní stranu tohoto návodu. Uložte si pečlivě účtenku jako doklad o koupi. Tato záruka zahrnuje všechny ostatní, ať již písemné nebo vyřčené, včetně všech na trhu běžných či svému účelu přizpůsobených záruk.

Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na e-mailovou adresu: info@profimed.cz, www.profimed.cz.

Redesept, péče o přístroje ústní hygieny

Přípravek určený k péči o pomůcky ústní hygieny – ústní sprchy, kartáčky, kelímky atd.

Použití:

Do nádoby nasypejte jednu polévkovou lžici Redeseptu = 10 g (u ústních sprch nasypejte prášek přímo do vaničky) poté nádobu naplňte teplou vodou (přibližně 200 ml) a důkladně zamíchejte. Předměty, které zamýšlíte vyčistit, vložte do nádoby na dobu 30 minut. U ústních sprch zapněte krátce pumpu, aby se roztok prášku dostal do vnitřního systému a ponechte jej působit několik hodin. Po použití přípravku Redesept ústní sprchu nebo vyčištěné předměty důkladně propláchněte čistou vodou. Doporučujeme výše uvedené pomůcky pravidelně jedenkrát měsíčně čistit, odvápnovat a dezinfikovat.



redesept®

Klinicky prokázané účinky REDESEPTU:

Odstraňuje vodní kámen. Dezinfekční účinek (ničí bakterie Streptococcus Mutans a Candida Albicans).

Upozornění:

Redesept používejte k čištění přístrojů a jiných pomůcek ústní hygieny. Vyčištěné předměty důkladně propláchněte pod tekoucí vodou. Vyvarujte se kontaktu se sliznicí nebo okem. Chraňte výrobek před dětmi! Uchovávejte výrobek v suchu a chladu.