



Přístroj na čištění pleti SonoClean ultrazvuková digitální špachtle.

Co je ultrazvuk?

Ultrazvuk je mechanické vlnění, které vyvolává akustický tlak, jehož frekvence leží nad hranicí slyšitelnosti lidského ucha, tedy nad hranicí 20 kHz. Pro lidské ucho je neslyšitelný, ale řada živočichů může ultrazvuk registrovat (delfíni, psi, netopýři).

Jak působí ultrazvuk na pleť?

Jedná se o bezbolestnou, integritu kožního povrchu nenarušující a šetrnou metodu, která čistí póry bez podráždění pleti a zarudnutí. Ošetření ultrazvukem je vhodné pro každou pleť. Výsledky jsou viditelné již po prvním ošetření – pleť je rozjasněná a regenerovaná. Ultrazvuk působí na pokožku jemnými vysokofrekvenčními vibracemi. Odstraní z pórů všechny nečistoty a odumřelé buňky, vyhlazuje jizvy po akné a zároveň provádí mikromasáž okolní tkáně.

Zajišťuje lepší vstřebatelnost kosmetických přípravků, intenzivně regeneruje pokožku, která po ošetření vypadá svěže a zdravě. Pleť se stává dokonale hydratovanou a jemnou. Ultrazvuk také odstraňuje povrchové odumřelé buňky a poskytuje kompletní regeneraci kůže. U stárnoucí, suché pleti vyhlazuje ultrazvuk povrch kůže a odstraňuje jemné vrásky. U mastné a aknézní pleti čistí póry a brání hromadění keratinu v ústí mazových žláz. Tím snižuje riziko tvorby zánětů. U všech typů pleti se pak ultrazvuk osvědčuje při zapracovávání účinných látek. Ultrazvuk provede také intenzivní mikromasáž kožní tkáně.

Princip činnosti přístroje pro čištění pleti SonoClean ultrazvuková digitální špachtle

SonoClean ultrazvuková digitální špachtle je jedním z nejpobulárnějších přístrojů, které kosmetičky ve své praxi dnes používají. Dlouhodobé testování tohoto přístroje zajišťuje výrazné účinky především v oblasti péče o obličej. Elektrické vibrace o frekvenci 28 000 kmitů za minutu vyvolávají mechanické kmitání o frekvenci tisíců kmitů za minutu. Prostupnost ultrazvuku zajišťuje, že nejen kůži čistí, ale také ji masíruje, což účinně napomáhá při odstranění nečistot, relaxuje vrásky, uvolňuje ucpané póry a nadměrně zrohovatělé vrstvy kůže tak, že pokožka klientky je čistá a hladká. SonoClean ultrazvukovou digitální špachtli lze používat v každém věku a je určena pro ženy i muže. Je účinná pro všechny věkové kategorie a všechny typy pleti.


Zralá a starší pleť se po procesu odlupuje, čímž nastává potlačení vrásek a vyhlazení pokožky. Zároveň dojde k aktivaci regeneračních procesů v buňkách kůže.

Suchá a citlivá pokožka je oživena odstraněním původních buněk v případě, že bude po zákroku použit přípravek typu krému (např. *Krém na suchou pleť noční / denní - 204, 201 nebo Nicream krém – 105*) nebo obličejové masky (např. *Zklidňující maska – 128 nebo MACADAMIA AGE výživná maska – 133*). Kůže je poté uvolněná a dojde k obnově elasticity pokožky.

Mastná a smíšená pleť se ultrazvukem vyčistí a projasní. Dojde k uzavření pórů, zmírní se nerovnosti pleti.

SonoClean ultrazvuková digitální špachtle je moderní kosmetický přístroj, který na jednoduchém fyzikálním principu pomáhá pečovat o krásu Vašich klientek a klientů. Používáním tohoto přístroje bude jejich pleť viditelně tonizovaná, vyčištěná a jemná.

Popis přístroje

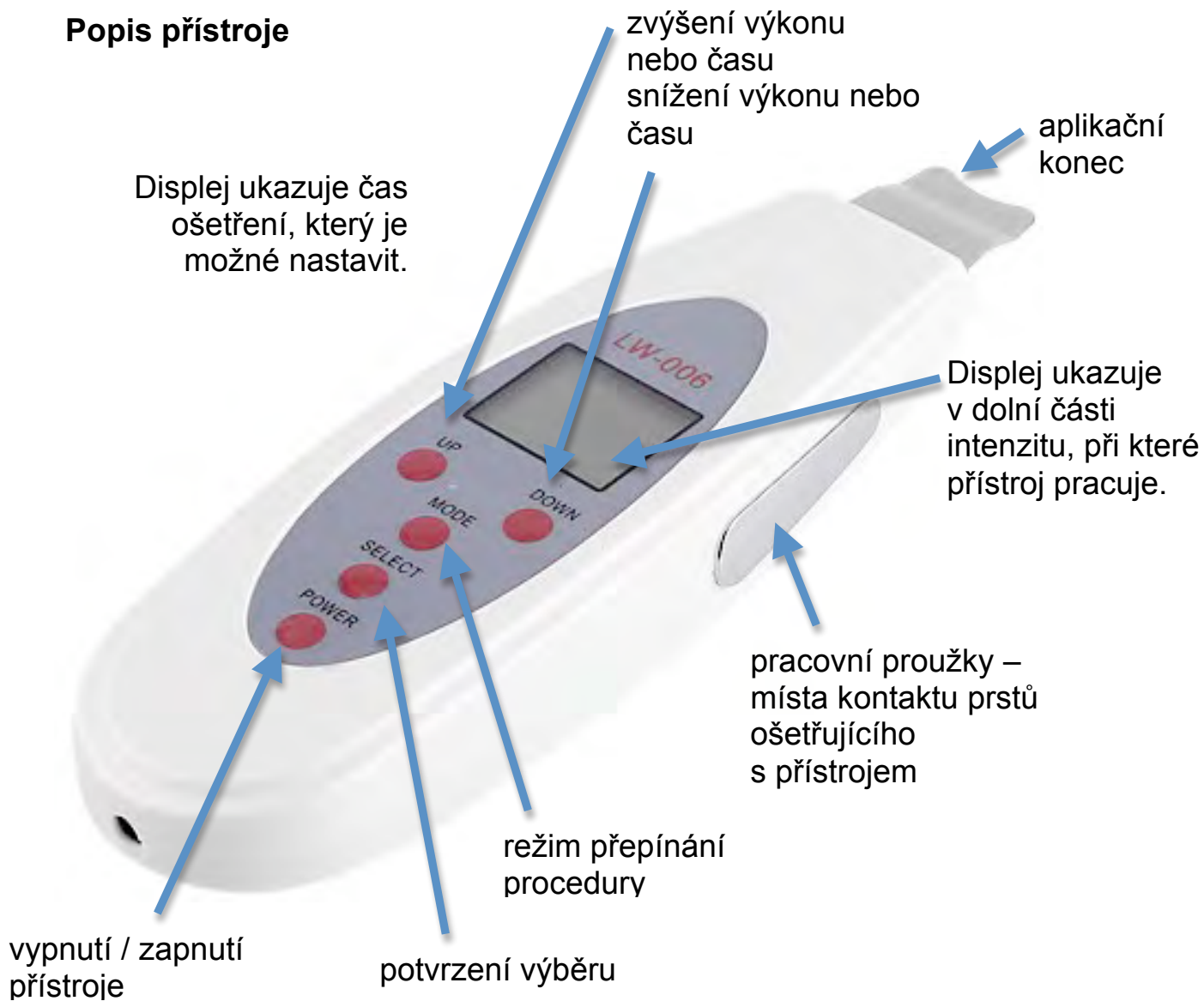

Režimy ošetření

Peel mode– peeling režim

Tone mode – režim zklidnění

Clean mode – čistící režim

Lift mode – režim kosmetické úpravy

Výsledky ošetření SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí

- odstranění nečistot, uvolnění pórů, vyhlazení pleti
- zapracování aktivních látek hlouběji do pleti k živým buňkám
- hydratace a odstranění napětí pleti
- zpomalení procesu stárnutí pleti
- zlepšení pružnosti pleti
- hluboká hydratace pokožky
- vyhlazení jemných i hlubších vrásek a jizev po akné, potlačení akné, zmírnění nežádoucí pigmentace
- dokonalé vyhlazení trudovité pleti
- aktivace buněčné obnovy pleti
- mnohonásobné zvýšení účinnosti kosmetických přípravků
- výsledkem je čistá, hydratovaná, rozjasněná, dobře prokrvená a zdravá pleť mladšího vzhledu

Kontraindikace

- kardiostimulátor
- epilepsie
- ekzémy a alergické stavy na ošetřované pleti

Ultrazvuková špachtle je velmi oblíbenou pomůckou v mnoha moderních kosmetických salonech.

Upozornění

U přístroje SonoClean ultrazvukovou digitální špachtlí není nutné rozlišovat polaritu séra. Uzavřený elektrický obvod vytvářejí vaše prsty a pokožka klientky. Proto se nepoužívají externí elektrody.

Použití přístroje SonoClean ultrazvuková digitální špachtle

1. Peeling pleti - PEEL mode

Omyjte pokožku **Čisticím a odličovacím mlékem (171)** nebo **Čisticím gelem CPK BIO (156)** a dočistěte vodou .

Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim PEEL, čas a intenzitu práce.

1. Plet' navlhčete lehkým postřikem **HYDROGENIA biominerální vodou ve spreji (175)**.

2. Na vlhké pokožce provedeme peeling pleti. Přístroj uchopte mezi prsty v místě pracovních proužků a po celou dobu činnosti jej takto držte. Čepelí se jemně dotkněte pokožky a pomalým pohybem přístroj po pokožce posunujte směrem dopředu. Po celou dobu zákroku držte přístroj pod úhlem 45°.

3. Vyhněte se oblastem s jemnou pokožkou, jako jsou například oční víčka . Odumřelé kožní buňky a další nečistoty budou viditelně odléhat od pokožky. Tyto části jsou zřetelně viditelné, pokud je nespátříte, mírně na pokožku přitlačte.

4. Následně plet' tonizujeme dle typu pleti **Tonikem hydratačním s chlorofylem (151)** nebo **Tonikem zmatňujícím s rostlinnými proteiny (152)**. Nakonec plet' ošetříme **NICREAM krémem pro citlivou plet' (105)** nebo **BIOMINERAL hydratačním krémem (304)**.

2. Projasnění pleti - TONE

Vibrace ultrazvuku pomáhají likvidovat enzym tyrozinázu, která tvoří pigment melanin. Nastává snížení tvorby melaninu a prosvětlení pleti. Zároveň ultrazvuk posiluje antioxidační mechanismy pokožky.

1. Omyjte pokožku **Čisticím a odličovacím mlékem (171)** nebo **Čisticím gelem CPK BIO (156)** a pokožku dočistěte vodou.
2. Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim TONE, čas a intenzitu práce.
3. Na očištěnou pokožku naneste v tenké vrstvě přípravek **White action krém pro zesvětlení pigmentu (110)**. Přístroj uchopte mezi prsty v místě pracovních proužků a po celou dobu činnosti jej takto držte. Plochu čepele přiložte na pokožku a pomalým pohybem přístrojem přejíždějte po pokožce. Po celou dobu zákroku udržíte plochu špachtle na pokožce. Pracujte mírným přitlakem. Krém zapracovávejte ultrazvukovou špachtlí po dobu 10 minut. Vyhněte se oblastem s jemnou pokožkou, jako jsou například oční víčka . Po ukončení práce zbytky krému nesmýváme, pouze lehce odsajeme kosmetickým ubrouskem.

3. Čištění pleti - CLEAN

1. Omyjte pokožku **Čisticím a odličovacím mlékem (171)** nebo **Čisticím gelem CPK BIO (156)** a dočistěte ji vodou
2. Na očištěnou pokožku naneste **Změkčující medovou masku (127)** a nechejte ji působit 5 minut.
3. Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim CLEAN, čas a intenzitu práce. Hluboké čištění pleti provádíme po dobu 5 – 10 minut. Přístroj uchopte mezi prsty v místě pracovních proužků a po celou dobu činnosti jej takto držte. Čepelí se jemně dotkněte pokožky a pomalým pohybem přístroje po pokožce čistíme směrem dopředu. Po celou dobu zákroku držte přístroj pod úhlem 45°. Vyhněte se oblastem s jemnou pokožkou. Na pokožku vyvineme přiměřený tlak. Druhou rukou přidržujeme čištěnou oblast.

Takto odstraníme až 80% mazu a nečistot z pórů. Zbytky mazu dočistíme pomocí kosmetických ubrousků.

4. Po vyčištění pleť tonizujeme **Tonikem zmatňujícím s rostlinnými proteiny (152)** a lehce vklepeme **Sérum adstringentní pro mastnou pleť (108)** nebo **Micro Ampoules Anti Sebum (3116)**. Nakonec nanese **Čistící masku (132)** nebo **Práškovou THERMO masku (130)** – při velmi mastné a trudovité pleti.

5. U akné pleti aplikujeme **Sérum pro akné pleti s antibakteriální přísadou (123)** nebo **Micro Ampoules Anti Acne (3123)** a **Masku anti – akné (125)**.

4. Kosmetický lifting pleti – LIFT

Vibrací a zahříváním ultrazvukem dojde ke stimulaci regeneračních buněk, pleť je tak chráněna před stárnutím. Zároveň ultrazvuk mikronizuje aktivní látky, a tím usnadňuje jejich průnik do kůže.

1. Omyjte pokožku **Čisticím a odličovacím mlékem (171)** nebo **Čisticím gelem CPK BIO (156)** a dočistěte ji vodou.
2. Zapněte ultrazvukovou špachtli, nastavte režim LIFT, čas a intenzitu práce.
3. Na očištěnou pokožku naneste v tenké vrstvě **Sérum intenzivní hydratační kolagenové (135)** nebo **Micro Ampoules Longevity Maris Collagen (3120)** a zapracovávejte je ultrazvukovou špachtlí po dobu 5 - 7 minut.
4. Přístroj uchopte mezi prsty v místě pracovních proužků a po celou dobu činnosti jej takto držte. Plochu čepele přiložte na pokožku a pomalým pohybem přístrojem přejíždějte po pokožce. Po celou dobu zákroku udržujte plochu špachtle na pokožce. Pracujte mírným přitlakem. Vyhněte se oblastem s jemnou pokožkou, jako jsou například oční víčka.
5. Na závěr ošetření nanese na pleť **RENOVIA denní krém (117)** nebo **REPHASIA obnovující krém (149)**.

Hygiena ošetření a údržba přístroje

Čepel po každém použití důkladně očistěte. Nikdy ji nemyjte pod tekoucí vodou. Při čištění musí být přístroj odpojený ze sítě. Nejvhodnější je kosmetický tampón nebo buničina napuštěná teplou vodou. Takto otřete všechny dostupné plochy přístroje. Aplikační konec můžete dezinfikovat přípravkem **Cleamen DEZI AP (602)** tak, že přístroj otíráte zvlhčeným kosmetickým tampónem. Poté aplikační konec ponechejte cca 5 minut vyschnout. Po každém ošetření klientky a vyčištění přístroje si umyjte ruce nejlépe mírně kyselým ošetřujícím mýdlem (např. **SENSITIVE Hydratační tělový šampon (173)**) a případně dezinfikujte (např. **SkinSept dezinfekce pokožky s virucidním účinkem (903)**).

Varování

1. Udržujte zařízení stále čisté, před každým použitím je čistěte dezinfikujte.
2. Tento přístroj nepoužívejte na poraněných nebo nemocných místech kůže.
3. Zařízení skladujte z dosahu dětí, těhotných žen a osob s mentálním postižením.
4. Zařízení nepoužívejte ve vzdálenosti menší jak 1 cm od okraje očí. Zařízení nikdy nepřikládejte na oči.
5. Pokud je přístroj v činnosti, vydává mírně drnčící zvuk „zhizhizhi“ .
6. Délka jednotlivých režimů závisí na Vašem časovém nastavení.
7. Pokud je přístroj rozbitý nebo nepracuje, prosíme, kontaktujte prodejce.

Specifikace

1. Výstupní výkon: 7 W
2. Napětí: stejnosměrné -15 V
3. Velikost: 25 cm x 20 cm x 7 cm

Písenná záruka

SonoClean ultrazvuková digitální špachtle je v záruce po celou dobu své záruční doby. Pokud je přístroj v záruce je servis bezplatný s výjimkou následujících situací:

1. Není doložené datum nákupu přístroje.
2. Obsluha přístroje se neřídila přesným návodem nebo byl přístroj rozebrán, například při snaze ho spravit vlastními silami.
3. Pokud přístroj upadl a rozbil se nebo byl záměrně poškozen.
4. Přístroj byl zapojený v nestabilním napětí nebo při manipulaci nebylo použito standardních zařízení, což způsobilo poruchu přístroje.

Záruka a servis zdarma platí po dobu jednoho roku ode dne prodeje.

Adresa servisního místa

Syncare Plus, s.r.o., Vranovská 70, 614 00 Brno

Tel: 548 521 611 e-mail: plus@syncare.cz www.syncare.cz

Kosmetická séra v dávkovačích

kód	název	laser	galvanika	pól	ultrazvuk
102	Sérum Relift Volume	ano	ano	(-)	ano
107	Sérum zklidňující	ano	ano	(-)	ano
108	Sérum odstringentní	ano	ano	(-)	ano
111	Enzymový peeling	ne	ano	(-)	ne
113	Sérum DECONGENESIA proti žilkám	ano	ano	(+)	ne
119	Sérum OFTAXYL 6% proti tmavým kruh	ne	ano	(-)	ano
123	Sérum pro aknézní pleť	ano	ano	(+)	ne
129	RETINOL 100%	ne	ne	---	ano
134	Sérum regenerační CPK BIO	ano	ano	(+)	ano
135	Sérum intenzivní hydratační kolagenové	ano	ano	(+)	ano
144	Sérum DermaBOTEXIN 30%	ano	ano	(+)	ano
146	Sérum DermaBOTEXIN 18%	ano	ano	(+)	ano
148	Sérum TriaBOTULOTOXIN	ano	ano	(+)	ano
159	Sérum Ultimate Rich Lifting oční	ano	ano	(-)	ano
302	Sérum mořské liftingové	ano	ano	(+)	ano

Mikroampulární kosmetická séra

kód	název	laser	galvanika	pól	ultrazvuk
3113	Micro Ampoules Venectine	ano	ano	(+)	ne
3115	Micro Ampoules Cellular Hydrating	ano	ano	(-)	ano
3116	Micro Ampoules Anti Sebum	ano	ano	(-)	ano
3117	Micro Ampoules DMAE vrásky	ano	ano	(-)	ne
3118	Micro Ampoules Pro Elasticity Vitamin C	ano	ano	(-)	ano
3119	Micro Ampoules Retinal C firming	ne	ano	(-)	ano
3120	Micro Ampoules Long. Mar. Collag.	ano	ano	(+)	ano
3121	Micro Ampoules Silver Eyes Radiance	ne	ano	---	ano
3122	Micro Ampoules Cellular Calming	ano	ano	(-)	ano
3123	Micro Ampoules Anti Acne	ano	ano	(+)	ano



Prohlášení o shodě

Adresa distributora v ČR: Syncare Plus, s.r.o.
Vranovská 70
614 00 Brno
tel: 548 521 611
fax: 548 521 230
e – mail: plus@syncare.cz
www.syncare.cz

Potvrzujeme shodu výrobku:

SonoClean ultrazvuková digitální špachtle

Kosmetický přístroj pro emitaci ultrazvukového vlnění pracující
s napětím stejnosměrného proudu 15 V.

Výrobek splňuje následující směrnice EU a právní normy ČR:

ČSN EN 60335-1
bezpečnost elektrických spotřebičů

ČSN EN 61000-6
(elektromagnetická kompatibilita)

Technická dokumentace je uložena u distributora.

Renata Svobodová,
jednatelka SynCare Plus, s.r.o.

V Brně, dne 15. 10. 2012.